


RAD ROD


DISPOZITIVUL PENTRU MASAJ UNIFORM ȘI CONTROLAT

RAD Rod poate să exercite presiune ghidată în zona vizată ca nimic altceva, mulțumit miezului din oțel, care este acoperit cu un material moale. Designul subțire minimizează suprafața, astfel încât să puteți regla presiunea fără durere, chiar și în zonele osoase cum ar fi zona tibială anterioară. Asta înseamnă că mușchii rigizi și toxinele se pot urmări mai bine, deoarece această bară asigură eliberare concentrată și descărcare maximă în modul în care numai RAD poate.


MEMBRU SUPERIOR

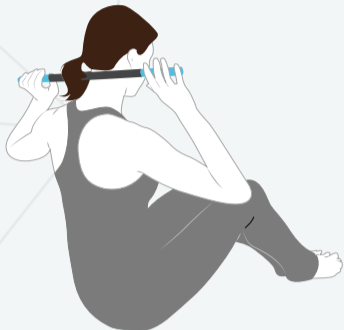

ZONĂ: GĂT SUPERIOR / BAZA CRANIULUI
TEHNICĂ: COMPRIMARE / RULARE

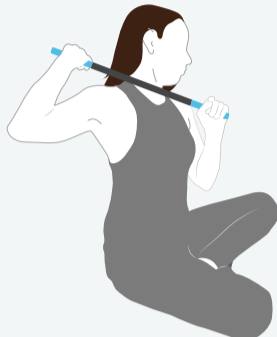

ZONĂ: STERNOCLEIDOMASTOIDIAN
TEHNICĂ: RULARE

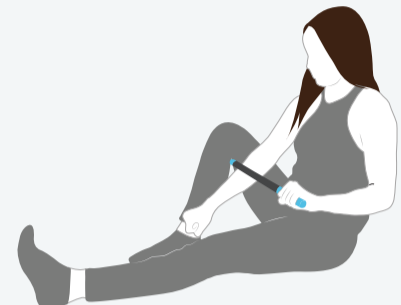


ZONĂ: ENTENSORII ANTEBRAȚULUI
TEHNICĂ: RULARE



ZONĂ: FLEXORII ANTEBRAȚULUI
TEHNICĂ: RULARE



ZONĂ: TRICEPS
TEHNICĂ: RULARE

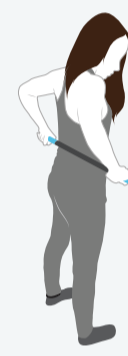


ZONĂ: QUADRATUS LUMBORUM
TEHNICĂ: RULARE

MEMBRU INFERIOR




ZONĂ: FESE
TEHNICĂ: RULARE

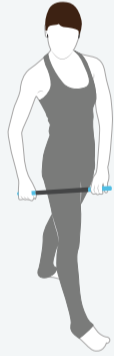

ZONĂ: TRACTUL ILIOTIBIAL
TEHNICĂ: RULARE



ZONĂ: CVADRICEPS
TEHNICĂ: RULARE

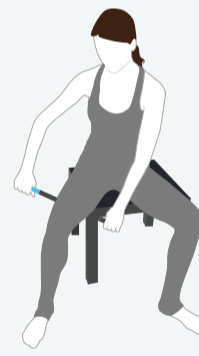

ZONĂ: HAMSTRING
TEHNICĂ: RULARE



ZONĂ: ADDUCTORI
TEHNICĂ: RULARE




ZONĂ: GAMBĂ
TEHNICĂ: RULARE



ZONĂ: TIBIAL ANTERIOR
TEHNICĂ: RULARE



ZONĂ: BOLTA PLANTARĂ
TEHNICĂ: COMPRIMARE

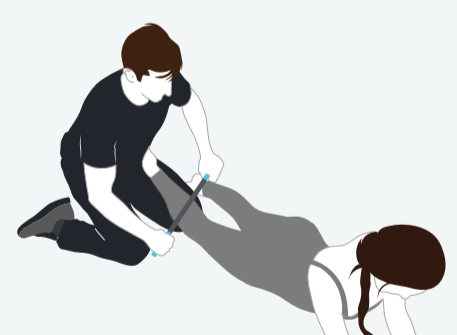

ZONĂ: GAMBĂ
TEHNICĂ: RULARE


TREBUIE ÎNCERCAT!

COMBINAȚIA RAD HELIX ȘI RAD ROD


"Făcălețul" Încercați această combinație extraordinară alcătuită din cele două dispozitive pentru a experimenta sinergia produselor RAD. Pur și simplu introduceți RAD Rod prin RAD Helix și invitați un prieten să vă elibereze întreaga spate. Poate doriți să returnați favoarea. Doar spuneam. (Apropo această combinație este și o modalitate excelentă de a economisi spațiu în timpul călătoriilor.)



COAPSĂ

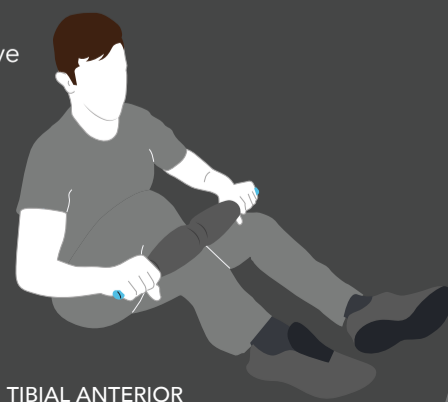

TIBIAL ANTERIOR

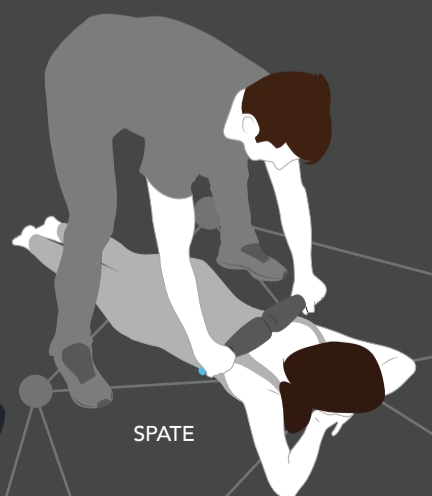

SPATE

RADRoller.ro
/radroller

f /RADRollerRomania
+40743447546